

Ensemble de dilatateurs vaginaux



Présentation

Les dilatateurs vaginaux Floravi aident à améliorer le confort lors des rapports sexuels, de l'insertion de tampons ou d'exams gynécologiques. Adaptés à un usage autonome ou encadré, ils offrent plusieurs tailles pour une progression à votre rythme. Leur silicone doux garantit un maximum de confort.

Bienfaits

Support des conditions spécifiques: Conviennent aux femmes atteintes de vulvodynie, névralgie pudendale, vestibulodynie, dyspareunies, agénésie vaginale ou syndrome MRKH.

Progression personnalisée et confort: Offrent plusieurs tailles pour avancer à votre rythme, avec une texture douce en silicone et l'usage recommandé du lubrifiant à base d'eau Floravi pour un maximum de confort.

Complément: Peuvent être utilisés seuls ou en complément d'un suivi médical ou thérapeutique, pour améliorer le bien-être intime global.

Caractéristiques

- Gradation des tailles et diamètres pour une progression en douceur
- Poignée en forme d'anneau pour faciliter la prise en main
- Pointe plus étroite pour faciliter l'insertion
- Silicone hypoallergénique dur mais flexible

Vendu en tant que nouveauté.



Floravi  

Pour plus d'informations, visitez notre site web floravi.com

Utilisation


Les dilatateurs Floravi s'utilisent selon le rythme et le confort de chaque femme. Il est recommandé de pratiquer des exercices quotidiens ou au moins 2 à 3 fois par semaine, avec une progression graduelle des tailles pour éviter toute gêne ou aggravation. L'insertion doit se faire dans un état de relaxation, avec un dilatateur préalablement réchauffé et lubrifié, dans la position la plus confortable. Chaque séance débute par une adaptation au dilatateur en douceur, avec des mouvements légers et progressifs. Le passage à une taille supérieure doit toujours s'accompagner d'un retour temporaire à la taille précédente pour assurer une détente optimale. La persévérance et la régularité sont essentielles pour des résultats efficaces.

Conseils d'utilisation

Utilisez le lubrifiant à base d'eau Floravi afin de faciliter l'insertion et d'assurer un confort optimal. Nettoyez les dilatateurs avant et après chaque usage avec le nettoyant Steri Clean de Floravi pour une utilisation sûre et hygiénique.

Si vous remarquez des saignements, cessez l'utilisation et consultez un professionnel de la santé;

Ensemble de 4 dilatateurs

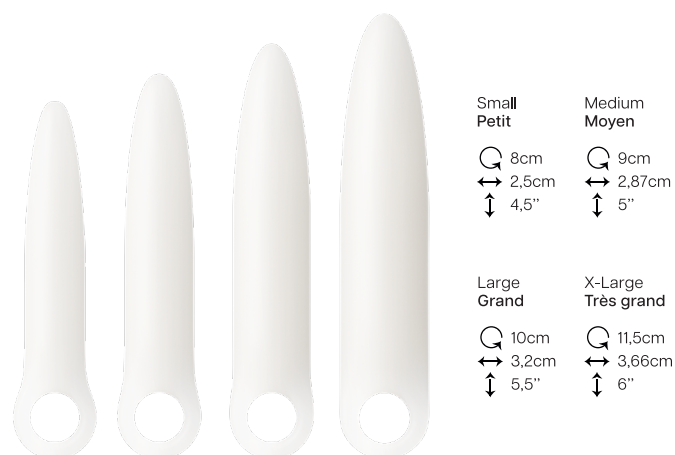

Dilator Set



Presentation

Floravi vaginal dilators help improving comfort during sexual intercourse, tampon insertion, or gynecological exams. Suitable for use independently or with professional guidance, they come in multiple sizes to progress at your own pace. Their soft silicone ensures maximum comfort.

Benefits

Support for specific conditions : Suitable for women with vulvodynia, pudendal neuralgia, vestibulodynia, dyspareunia, vaginal agenesis, or MRKH syndrome.

Personalized progression and comfort : Offer multiple sizes to progress at your own pace, with a soft silicone texture and the recommended use of Floravi's water-based lubricant for maximum comfort.

Complement : Can be used alone or alongside medical or therapeutic follow-up to enhance overall intimate well-being.

Characteristics

- Gradual sizes and diameters
- Ring-shaped base for easy handling
- Tapered tip to ease insertion
- Firm body-safe silicone but flexible

Sold for novelty use only.



Floravi  

For more information,
visit our website floravi.com

Use

Floravi dilators are used according to each woman's pace and comfort. It is recommended to practice daily exercises or at least 2 to 3 times per week, gradually progressing through sizes to avoid discomfort or worsening symptoms. Insertion should be done in a relaxed state, with the dilator pre-warmed and lubricated, in the most comfortable position. Each session begins with gentle adaptation to the dilator, using light and gradual movements. When moving to a larger size, it's important to temporarily return to the previous size to ensure optimal relaxation. Consistency and perseverance are key for effective results.

How to use

Use Floravi's water-based lubricant to make insertion easier and ensure optimal comfort. Clean the dilators before and after each use with Floravi's Steri Clean cleanser for safe and hygienic use.

If you notice bleeding, stop using immediately and consult a health professional;

Set of 4 dilators

