

# Poids vaginaux



## Présentation

L'ensemble d'exerciseurs Kegel Floravi comprend quatre perles interchangeables de trois poids pour progresser à votre rythme. Priorisez votre bien-être intime!

## Bienfaits

**Plaisir accru :** Augmentent les sensations orgasmiques, puisque ces contractions musculaires sont à la base de l'orgasme.

**Bien-être intime global :** Soutient la santé sexuelle, stimule la confiance corporelle et favorise une vie intime épanouie.

**Public cible :** Personnes en âge de périménopause/ ménopause, en période de postpartum, ou cherchant à renforcer leur plancher pelvien.

## Utilisation

Insérez les poids vaginaux Floravi comme un tampon, dans la position la plus confortable pour vous (accroupie, assise ou couchée). Commencez par les porter environ 30 minutes par jour pour vous habituer, puis augmentez graduellement jusqu'à quelques heures, au moins 4 jours par semaine. Pratiquez des contractions du plancher pelvien et, une fois à l'aise, portez-les pendant des activités plus dynamiques (marche, tâches ménagères, squats).


Progresser à votre rythme en changeant de poids selon votre confort, de 30 g à 90 g. Un usage régulier permet d'obtenir des résultats optimaux.

## Conseils d'utilisation

Au besoin, utilisez le lubrifiant à base d'eau Floravi afin de faciliter l'insertion et d'assurer un confort optimal. Nettoyez les poids ainsi que la sangle séparément avant et après chaque usage avec le nettoyant Steri Clean de Floravi pour une utilisation sûre et hygiénique. Il est strictement déconseillé de partager vos poids avec d'autres personnes.

## Caractéristiques

- 4 perles (2x 30 g, 1x 40 g, 1x 50 g)
- Diamètre de 29 mm
- Sangle pour faciliter le retrait
- Perles avec poids libres efficaces grâce au mouvement du corps
- Silicone hypoallergénique
- Confortables et discrètes

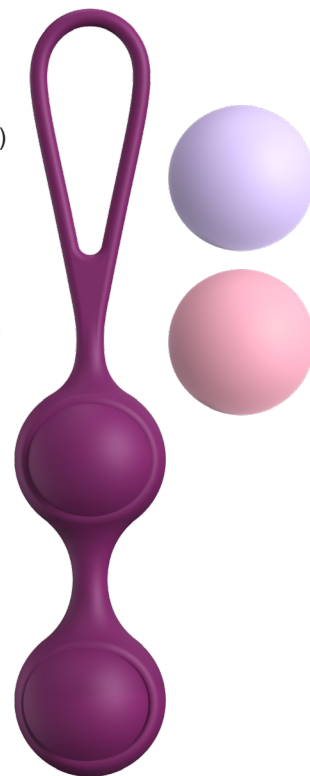

*Vendu en tant que nouveauté.*



**Floravi**  

Pour plus d'informations,  
visitez notre site web [floravi.com](http://floravi.com)

# Vaginal Weights



## Presentation

The Floravi Kegel exercise set includes four interchangeable beads with three different weights, allowing you to progress at your own pace. Prioritize your intimate well-being!

## Benefits

**Increased pleasure :** Enhance orgasmic sensations, as these muscle contractions are at the core of orgasm.

**Overall intimate well-being :** Supports overall sexual, boosts body confidence, and encourages a fulfilling intimate life.

**Target audience:** Women approaching perimenopause or menopause, those in the postpartum period, or those looking to strengthen their pelvic floor.

## Use

Insert Floravi's vaginal weights like a tampon, in whatever position feels most comfortable for you (squatting, sitting, or lying on your back). Start by wearing them for about 30 minutes a day to get used to them, then gradually increase to a few hours, at least 4 days a week. Practice pelvic floor contractions and, once comfortable, wear them during more dynamic activities (walking, household chores, squats).


Progress at your own pace by switching to heavier weights as you feel ready, from 30 g to 90 g. Regular use will help you achieve optimal results.

## How to use

If needed, use Floravi's water-based lubricant to make insertion easier and ensure optimal comfort. Clean the weights and the strap separately before and after each use with Floravi's Steri Clean cleanser for safe and hygienic use.

## Characteristics

- 4 beads (2x 30 g, 1x 40 g, 1x 50 g)
- 29 mm diameter
- Strap to facilitate removal
- Beads containing free weights working with natural bodily movements
- Body-safe silicone
- Comfortable and discreet

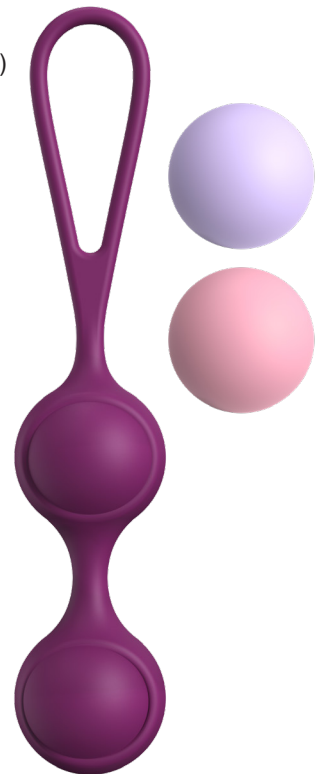

*Sold for novelty use only.*



**Floravi**  

For more information,  
visit our website [floravi.com](https://www.floravi.com)